

*Bisco*

CE

# ***DUAL-SYRINGE***

## Instructions for Use



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000  
1-800-247-3368

**FI**

IN-090R7  
Rev. 10/16

# KAKSOISRUISKU


## YLEISTA

Kaksoisruisku sekoittaa yhtenäisen seoksen basea ja katalystia sekoituskärjellä ruiskutettavaksi. Ruisku tuo käyttömukavuutta hammaslääkäreille, sillä sen avulla aineen voi viedä suoraan preparaatiolle tai kruunulle ruiskutettavaa määrää tarkkaillen.

Valitse käytettävän materiaalin yksilöllinen ohje, josta selviää yleiset tiedot, käyttötarkoitukset ja käyttöohjeet.

## KÄYTTÖOHJEET

1. Poista kaksoisruiskun korkki kiertämällä sitä vastapäivään ja vetämällä irti.
2. Ensimmäisellä kaksoisruiskun käyttökerralla: ruiskuta ensimmäiset 2-3mm ainetta sekoituslehtiölle varmistaaksesi seoksen tasaisuuden.
3. Liitä sekoituskärki paikalleen asettamalla kärjen keskellä oleva ura (A) ruiskun uraan (B) ja kiertämällä myötäpäivään kunnes kärki lukittuu.

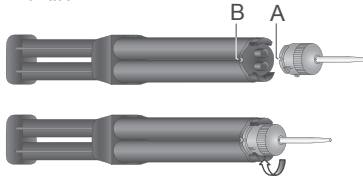

4. **VAIHTOEHTO 1:** Ruiskuta ainetta preparaatioalueelle tai kruunuun sekoituskärjellä.

**VAIHTOEHTO 2:** Viedessäsi ainetta suuhun Unit-Dose-kärjellä aseta se sekoituskärjen suulle ja täytä se ruiskuttamalla. Aseta paikalleen mäntä ja kärjen pää.

5. **Sekoituskärki tulee jättää paikalleen seuraavaa käyttöä varten. Suunsisäisen käytön jälkeen se on desinfioitava ennen säilytystä. Ennen uuden kärjen liittämistä ruiskuun ruiskuta 2-3mm basea ja katalystia sekoituslehtiölle.**

**HYGIENIA:** Yleisesti saatavilla olevien suojapussien käyttäminen on suositeltavaa, jotta ruiskut eivät kontaminoitu hoidon aikana.

**HÄVITTÄMINEN:** Noudata jätteen hävittämistä koskevia hoitoyhteisön säännöksiä. Jos näitä ei ole, noudata jätteen hävittämistä koskevia kansallisia tai alueellisia säännöksiä.

**TAKUU:** BISCO, Inc. on vastuullinen korvaamaan tuotteet, jotka on todettu viallisiksi. BISCO, Inc. ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat tuotteiden ohjeiden mukaisesta käytöstä tai käyttäjän kyvyttömyydestä käyttää tuotteita annettujen ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä on ennen tuotteen käyttöönottoa vastuu varmistua tuotteen soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen. Tuotteen käyttäjällä on koko vastuu ja vastuuvollisuus tuotetta käytettäessä.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
847-534-6000  
www.bisco.com



BISICO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
Tél. : 33-4-90-42-92-92