

*Bisco*

CE

# ***DUAL-SYRINGE***

## Instructions for Use



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000  
1-800-247-3368

**FR**

IN-090R7  
Rev. 10/16

# LE SYSTEME DUAL-SYRINGE


## INFORMATION GENERALE

Le système DUAL-SYRINGE permet d'obtenir un mélange homogène de la base et du catalyseur en utilisant l'embout mélangeur. Il offre un confort d'utilisation, en permettant au praticien de placer le produit directement à l'intérieur de l'intrados avec un parfait contrôle de la quantité de produit délivré.

Se référer au livret d'instruction pour chaque produit dans son mode d'emploi spécifique - INFORMATION GENERALE, INDICATIONS, ET MODE D'EMPLOI.

## MODE D'EMPLOI

1. Retirer le capuchon de la seringue DUAL-SYRINGE par une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirer.
2. Lors de la première utilisation du DUAL-SYRINGE, faire sortir 2 à 3mm de matériau sur une feuille pour s'assurer d'un mélange homogène du matériau.
3. Placer l'embout mélangeur en alignant l'encoche située au centre de l'embout (A) avec l'encoche de la seringue (B) et en faisant une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au blocage.

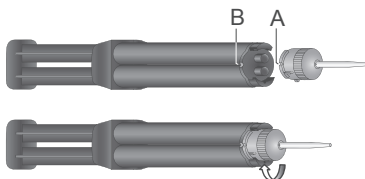

4. **OPTION 1 :** Application directe du matériau dans la préparation ou dans l'intrados en utilisant l'embout mélangeur.  
**OPTION 2 :** Pour application intra orale en utilisant un embout uni-dose. Placer un embout uni-dose à l'extrémité de l'embout mélangeur et injecter le matériau en seringue dans l'embout uni-dose. Placer le piston ou le bouchon, puis l'insérer sur un pistolet d'injection.
5. **L'embout mélangeur DUAL-SYRINGE devra rester sur la double seringue jusqu'à la prochaine utilisation. En cas d'utilisation intraorale, essuyer la surface à l'aide d'une lingette désinfectante avant le stockage. Avant de placer un nouvel embout de mélange sur la seringue, faire sortir 2-3mm de base et de catalyseur sur un bloc à spatuler pour s'assurer du débit uniforme des deux produits.**

**HYGIÈNE :** L'utilisation de pochettes de protection hygiéniques couramment disponibles pour éviter toute contamination des seringues au cours du traitement, est recommandée.

**CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION :** Se référer aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des déchets. En l'absence de telles dispositions, se référer aux dispositions nationales ou régionales relatives à l'élimination des déchets.

**GARANTIE :** BISCO, Inc. s'engage à remplacer tout produit avéré défectueux. BISCO, Inc. Ne peut être tenu responsable des dommages ou pertes directes ou indirectes, consécutives à une utilisation non conforme ou à une mise en œuvre incorrecte des produits. Avant toute utilisation, l'utilisateur est tenu de vérifier que le produit est compatible avec l'usage qu'il veut en faire. L'utilisateur assume tous les risques et les conséquences qui peuvent en découler.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
847-534-6000  
www.bisco.com



BISICO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
Tél. : 33-4-90-42-92-92