

*Bisco*

CE

# ***DUAL-SYRINGE***

## Instructions for Use



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000  
1-800-247-3368

**DE**

IN-090R7  
Rev. 10/16

# DUAL-SPRITZEN SYSTEM


## ALLGEMEINE INFORMATION

Das Dual Spritzen-System erlaubt eine homogene Mischung von Basis und Katalysator unter Verwendung der Mixing Tips. Mit diesem praktischen Applikationssystem kann das Material direkt in die Präparation/Restauration appliziert werden während dem die Menge des herausgepressten Material kontrolliert wird.

Siehe entsprechendes Produkte Informationsblatt für materialspezifische INFORMATIONEN, ANWENDUNGEN UND BEDIENUNGSANLEITUNG.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Entfernen Sie den Verschluss von der DUAL-SPRITZE mit einer rotierenden Bewegung gegen den Uhrzeigersinn und ziehen ihn heraus.
2. Bei der ersten Verwendung der DUAL-SPRITZE: Applizieren Sie ca. 2-3mm des Materials auf einen Mischblock um sicher zu stellen, dass Sie ein homogenes Material haben.
3. Plazieren Sie den Mixing Tip indem Sie den Einschnitt (A) mit der Kerbe in der Spritze (B) verbinden und mit einer rotierenden Bewegung im Urzeigersinn drehen bis er einrastet.

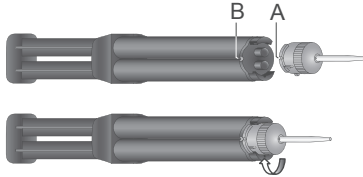

4. ANWENDUNG 1: Spritzenmaterial in die Präparation oder Restauration mit Mixing Tip.

ANWENDUNG 2: Für die intraorale Verwendung von Unit-Dose Tips: Plazieren Sie einen Unit-Dose Tip auf die Mixing Tip Öffnung und füllen Sie Material in den Unit-Dose Tip. Plazieren Sie den Stöpsel und setzen Sie den Tip in eine Unit-Dose Spritze.

5. **Der DUAL-SPRITZEN Mixing Tip sollte bis zur nächsten Verwendung auf der Spritze belassen werden. Wenn intraoral verwendet, sollte es vor der Lagerung mit einem Desinfektionsmittel abgewischt werden. Im Falle wo ein neuer Tip auf der Spritze montiert wird, sollte zuerst 2-3mm Material auf einen Mischblock appliziert werden.**

**HYGIENE:** Zur Vermeidung von Kontaminierung der Spritzen während der Behandlung wird die Verwendung von handelsüblichen Hygieneschutzabdeckungen empfohlen.

**ENTSORGUNG:** Die lokalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten. Liegen diese nicht vor, die nationalen bzw. regionalen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten.

**GEWÄHRLEISTUNG:** BISCO, Inc. garantiert den Ersatz der Produkte sofern die Waren nicht in einwandfreien Zustand sind. BISCO, Inc. lehnt jedoch jede Verantwortung ab, für Beschädigungen die von einer unsachgemässen Verwendung herrühren. Vor dem Gebrauch, muss der Gebraucher abklären, ob das Produkt für den entsprechenden Einsatz geeignet ist. Der Gebraucher übernimmt die gesamte Verantwortung in Verbindung mit der korrekten Verwendung des Produktes.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
847-534-6000  
www.bisco.com



BISICO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
Tél. : 33-4-90-42-92-92