

Bisco

CE

ACE[®]  **Dispenser**
one and done

Instructions For Use

DK



Bringing Science to
the *Art* of Dentistry[™]


BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368

U.S. Patent 7,748,980

IN-179R1

Rev. 6/11

ACE[®]* DISPENSER BRUGSANVISNING

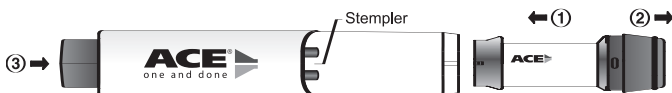

▶ SÅDAN ISÆTTES OG AKTIVERES DEN NYE PATRON

BEMÆRK: Sørg for, at ACE Dispenserens to røde stempler er trukket helt tilbage ved at trykke på udskydningsknappen. (Stemplerne bør ikke kunne ses forud for isætning af patron).

1. Med etiketten opad sæt patronen i ACE Dispenseren.
2. Fjern hættten.
3. Tryk på den orange knap gentagne gange, indtil der doseres dråber fra begge patronens spidser.

▶ SÅDAN DOSERES PRODUKTET TIL BRUG

1. Anbring begge patronspidser over en blandeskål, og tryk på den orange knap 1 gang. Den korrekte mængde materiale vil blive doseret. Om nødvendigt, lad spidserne røre ved blandeskålens side for at udløse dråberne.
2. Sæt omhyggeligt hættten på patronen igen. **Det anbefales, at patronen forbliver i ACE Dispenseren, indtil den er tom.**



▶ SÅDAN AFMONTERES PATRONEN

1. For at fjerne patronen, drej ACE Dispenseren, så logoet vender nedad. **Fjern hættten og** skub udskydningsknappen.
2. Træk patronen ud af ACE Dispenseren.
3. Kassér hætte og patron.
4. Isæt en ny patron.

DESINFEKTION: Anvend overfladedesinfektionsspray eller -vådservietter anbefalet til ABS, PVC og polykarbonat (PC) plastik i henhold til fabrikantens vejledning. Undgå direkte kontakt mellem desinfektionsmidlet og adhæsivmaterialet i patronspidserne. Må ikke nedsænkes i væske eller autoklaveres.

GARANTI: BISCO, Inc. anerkender sit ansvar for at udskifte produktet, hvis det viser sig at være defekt. BISCO, Inc. påtager sig intet ansvar for nogen skade eller noget tab, direkte eller indirekte som følge af brug eller manglende mulighed for at bruge produktet som beskrevet. Før brug er det brugerens ansvar at sikre, at produktet er hensigtsmæssigt til den tilsigtede brug. Brugeren påtager sig alt ansvar og enhver risiko forbundet dermed.

* ACE er et registreret varemærke for BISCO, Inc.

Made in the U.S.A.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com

 BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92