

Bisco

CE

ACE[®]  **Dispenser**
one and done

Instructions For Use

FI



Bringing Science to
the *Art* of Dentistry[™]


BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368

U.S. Patent 7,748,980

IN-179R1

Rev. 6/11

ACE[®]* ANNOSTELIJAN KÄYTTÖOHJE

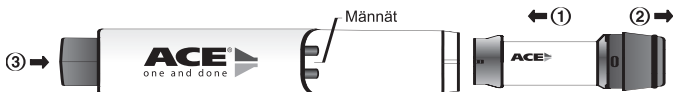

UUDEN SÄILIÖN PAIKOILLEEN ASETTAMINEN JA AKTIVOIMINEN

HUOMAUTUS: Varmista työntöpainiketta (eject) painamalla, että ACE-annostelijan kaksi punaista mäntää ovat kokonaan sisällä. (Männät eivät saa olla näkyvissä ennen säiliön paikoilleen asettamista.)

1. Työnnä säiliö ACE-annostelijaan siten, **että etiketti on ylöspäin**.
2. Irrota suojus.
3. Paina oranssia painiketta toistuvasti, kunnes säiliön molemmista kärjistä tulee pisaroita.

TUOTTEEN ANNOSTELU KÄYTTÖVALMIIKSI

1. Aseta säiliön molemmat kärjet sekoitusastian yläpuolelle ja paina oranssia painiketta kerran. Annostelijasta tulee oikea määrä ainetta. Poista tarvittaessa pisarat koskettamalla kärjillä sekoituskupin reunaan.
2. Aseta suojus tiukasti takaisin säiliöön. **On suositeltavaa jättää säiliö ACE-annostelijaan, kunnes se on tyhjä.**



SÄILIÖN POISTAMINEN

1. Kun poistat säiliön, käännä ACE-annostelija siten, että logo on alaspäin. **Irrota suojus ja työnnä Eject-painiketta.**
2. Vedä säiliö ulos ACE-annostelijasta.
3. Hävitä suojus ja säiliö.
4. Kiinnitä annostelijaan uusi säiliö.

DESINFIOINTI: Käytä ABS-, PVC- ja polykarbonaatti (PC) -muoveille suositeltavia pintadesinfiointisuihkeita tai desinfiointipyhkeitä valmistajan ohjeen mukaan. Älä päästä desinfiointiliuosta kosketukseen säiliön kärkien liimamateriaalin kanssa. Annostelijaa ei saa autoklavoida tai upottaa nesteeseen.

TAKUU: BISCO, Inc. tunnustaa vastuunsa korvata vialliseksi osoittautuvat tuotteet. BISCO, Inc. ei vastaa mistään suorista tai seurauksellisista vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat kyseisten tuotteiden käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttäjä niitä kuvatulla tavalla. Käyttäjän vastuulla on ennen käyttöä määrittää tuotteiden sopivuus aiottuun tarkoitukseen. Käyttäjä ottaa itselleen kaikki asiaan liittyvät riskit ja vastuut.

* ACE on BISCO, Inc. rekisteröity tavaramerkki.

Made in the U.S.A.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com

 BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92