

Bisco

CE

ACE[®]  **Dispenser**
one and done

Instructions For Use

IT



Bringing Science to
the *Art* of Dentistry™


BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368

U.S. Patent 7,748,980

IN-179R1

Rev. 6/11

DISPENSER ACE^{®*}
ISTRUZIONI PER L'USO

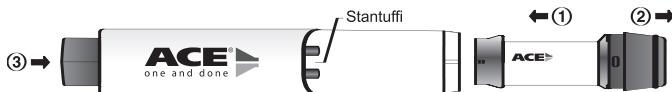

CARICAMENTO E ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA CARTUCCIA

NOTA: assicurarsi che i due stantuffi rossi del Dispenser ACE siano completamente ritratti premendo il pulsante di estrazione. (Gli stantuffi non devono essere visibili prima di caricare la cartuccia).

1. **Con l'etichetta rivolta verso l'alto**, inserire la cartuccia nel Dispenser ACE.
2. Togliere il tappo.
3. Premere il pulsante arancione più volte finché alcune gocce fuoriescono da entrambi i puntali della cartuccia.

EROGAZIONE DI PRODOTTO PER L'USO

1. Posizionare entrambi i puntali della cartuccia in una vaschetta di miscelazione e premere il pulsante arancione 1 volta. Il materiale verrà erogato nella corretta proporzione. Se necessario, appoggiare i puntali sul bordo della vaschetta di miscelazione per fare uscire le gocce.
2. Rimettere il tappo sulla cartuccia serrandolo bene. **Si consiglia di lasciare la cartuccia nel Dispenser ACE fino a completo esaurimento.**



ESTRAZIONE DELLA CARTUCCIA

1. Per estrarre la cartuccia girare il Dispenser ACE in modo che il logo sia rivolto verso il basso. **Dopo aver tolto il tappo**, far slittare il pulsante di estrazione.
2. Tirare fuori la cartuccia dal Dispenser ACE.
3. Gettare via il tappo e la cartuccia.
4. Caricare una nuova cartuccia.

DISINFEZIONE: usare disinfettanti per superfici in spray o in salviette raccomandati per plastiche ABS, PVC e policarbonato (PC) come da istruzioni del produttore. Evitare il contatto diretto della soluzione disinfettante con il materiale adesivo sui puntali della cartuccia. Non immergere e non sterilizzare in autoclave.

GARANZIA: BISCO, Inc. si assume la responsabilità di sostituire il prodotto se si dimostrano eventuali difetti. BISCO, Inc. declina qualsiasi responsabilità per danni o perdite, sia diretti che consequenziali, derivanti dall'uso o dall'incapacità di utilizzare i prodotti come sopra descritto. Prima dell'utilizzo, è responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per l'uso che se ne intende fare. L'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità collegate all'utilizzo del prodotto.

Made in the U.S.A.

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com

 BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92