

**Bisco**

CE

**ACE**<sup>®</sup>  **Dispenser**  
one and done

## Instructions For Use

**PT**



Bringing Science to  
the *Art* of Dentistry™


U.S. Patent 7,748,980

IN-179R1

Rev. 6/11

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000  
1-800-247-3368

**DISPENSADOR ACE<sup>®</sup>\***  
**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

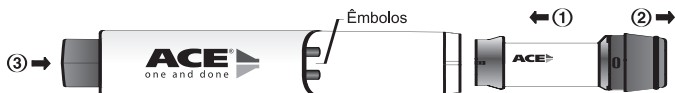

**PARA CARREGAR E ACTIVAR O NOVO CARTUCHO**

**NOTA:** assegure-se de que os dois êmbolos vermelhos do Dispensador ACE estejam totalmente recolhidos ao pressionar o botão de ejeção. (Os êmbolos não devem estar visíveis antes de carregar o cartucho).

1. Com a etiqueta voltada para cima, insira o cartucho no Dispensador ACE.
2. Retire a tampa.
3. Pressione o botão laranja repetidamente até conseguir extrair gotas das duas pontas do cartucho.

**EXTRACÇÃO DO PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO**

1. Posicione as duas pontas do cartucho sobre um recipiente de mistura e pressione o botão laranja uma vez. Será extraída a quantidade do material correcta. Se necessário, bata com a ponta do dedo num dos lados do recipiente de mistura para que as gotas saiam.
2. Aperte bem a tampa do cartucho. **Recomenda-se que o cartucho seja mantido no Dispensador ACE até se encontrar vazio.**



**EJECCÃO DO CARTUCHO**

1. Para retirar o cartucho, gire o Dispensador ACE de modo a que o logótipo esteja voltado para baixo. **Retirada a tampa**, empurre o botão de ejeção.
2. Retire o cartucho do Dispensador ACE.
3. Elimine a tampa e o cartucho.
4. Carregue um novo cartucho.

**DESINFECÇÃO:** utilize um vaporizador desinfectante de superfície ou um produto de limpeza recomendado para plásticos ABS, PVC e policarbonatos (PC), de acordo com as instruções do fabricante. Evite o contacto directo da solução desinfectante com o material aderente nas pontas do cartucho. Não mergulhe em água ou esterilize com autoclave.

**GARANTIA:** a BISCO, Inc. assume a sua responsabilidade na troca de produtos que se verifique serem defeituosos. A BISCO, Inc. exclui qualquer responsabilidade por quaisquer danos ou perdas, directos ou indirectos, que advenham da má utilização ou da incapacidade de utilização dos produtos descritos. É da responsabilidade do utilizador, antes da utilização, verificar a adequação do produto ao uso pretendido. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades daí advenientes.

Made in the U.S.A.

BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
847-534-6000  
1-800-247-3368  
[www.bisco.com](http://www.bisco.com)

 BISCO France  
120, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon de Provence  
France  
Tél. : 33-4-90-42-92-92