

*Bisco*

CE

***DUAL-SYRINGE***

## Instructions for Use

PT

IN-090R8  
Rev. 11/18



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368

# SISTEMA DE APLICAÇÃO DE SERINGA DUPLA


## INFORMAÇÃO GERAL

O sistema de aplicação por SERINGA DUPLA permite uma mistura consistente da base e do catalizador quando usados com a ponta misturadora fixa. Este sistema é útil e prático permitindo ao dentista a aplicação directa do material na preparação ou restauração ao mesmo tempo que se controla o material gasto.

Recorrer às folhas de instrução do produto para especificações sobre o material INFORMAÇÃO GERAL, INDICAÇÕES, INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Retirar a tampa da seringa dupla rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio e puxando-a para fora.
2. Na primeira utilização da seringa dupla: desperdiçar os primeiros 2-3mm num bloco de espatulação para assegurar uma mistura homogênia do material.
3. Colocar a ponta misturadora alinhando a ranhura do centro (A) da ponta com a ranhura da seringa (B) e rodar no sentido dos ponteiros do relógio até ficar numa posição fixa.

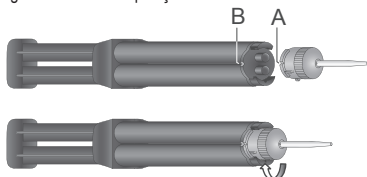

4. **OPÇÃO 1:** Aplicação do material na preparação ou restauração usando a ponta misturadora.  
**OPÇÃO 2:** Aplicação intra-oral do material com uma ponta unidoseadora. Colocar uma ponta unidoseadora na abertura da ponta misturadora. Colocar o êmbolo e inserir a ponta numa seringa unidoseadora.
5. **A ponta misturadora da seringa dupla deve ficar colocada até a próxima aplicação. A seringa dupla se for usada intra-oralmente deve ser limpa e desinfetada antes do armazenamento. Antes de colocar uma nova ponta na seringa deve desperdiçar num bloco de espatulação 2-3mm de base e catalizador.**

**HIGIENE:** Recomenda-se a utilização de protectores de plástico para evitar qualquer contaminação das seringas durante o tratamento.

**ELIMINAÇÃO:** Consulte as regulamentações comunitárias relacionadas com os resíduos. Na falta destas, consulte as regulamentações nacionais ou regionais relacionadas com os resíduos.

**GARANTIA:** A BISCO, Inc. reconhece a sua responsabilidade na reposição de produtos, quando se prove a existência de defeitos. A BISCO, Inc. não aceita ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas, directas ou indirectas, decorrentes da utilização ou da incapacidade para utilização dos produtos como descrito. Compete ao utilizador a responsabilidade da determinação prévia da adequação do produto ao fim a que se destina. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades com ele ligados.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
1-847-534-6000  
www.bisco.com

EC	REP
----	-----

 BISCO France  
208, allée de la Coudoulette  
13680 Lançon De Provence  
France  
33-4-90-42-92-92