

Bisco

CE

DUAL-SYRINGE

Instructions for Use

NO

IN-090R8
Rev. 11/18



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

DUAL-SYRINGE Blandesystem


GENERELL INFORMASJON

DUAL-SYRINGE blandesystem sikre rask og korrekt blanding av base og katalysator, ved hjelp av de spesielle blandespissene. Enkel å bruke, tannlegen kan sprøyte materialet direkte inn i preparasjon/restaurering, samtidig som han har full kontroll med materialforbruket.

Forøvrig henvises til de produktspesifikke GENERELL INFORMASJON, INDIKASJONER OG BRUKSANVISNINGER.

BRUKSANVISNING

1. Beskyttelseshetten på DUAL-SYRINGE fjernes ved å vri moturs og trekke av.
2. Ved første gangs bruk av en DUAL-SYRINGE: Trykk ut de første 2-3mm av materialet på en blandebløkk for å sikre en homogen blanding.
3. Sett blandespissen på plass ved å orientere merket i låseringen (A) mot tilsvarende merke på sprøyten (B). Vri så låseringen medurs til låst stilling.

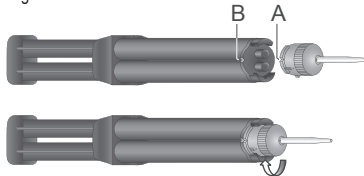

4. **TEKNIKK 1:** Sprøyt materialet direkte inn i preparasjonen eller restaureringen ved hjelp av blandespissen.
TEKNIKK 2: For intraoral bruk med Unit-Dose Tip: Sett en unit-dose tip rett på blandespissen og fyll den med ønsket materialmengde. Sett pluggen på plass og sett unit-dose-tippen i tilhørende sprøyte.
5. **Blandespissen skal stå på sprøyten til neste applisering/pasient. Tørk av med sprit om den er brukt intraoralt. Før du setter på ny spiss, press ut 2-3mm materiale for å være sikker på blandingsforholdet.**

HYGIENE: Av hygieniske årsaker anbefaler vi å bruke beskyttelse for å unngå kontaminasjon av sprøyten.

AVHENDING: Se kommunale forskrifter som gjelder for avfallshåndtering. Hvis disse ikke finnes, se nasjonale eller regionale forskrifter som gjelder for avfallshåndtering.

GARANTIBESTEMMELSER: BISCO, Inc. erstatter defekte produkter. BISCO, Inc. er ikke ansvarlig for skader eller tap - direkte eller indirekte - som skyldes bruk, eller feilaktig bruk av produktene. Det er den enkelte brukers ansvar å avgjøre om produktet er egnet i hvert enkelt tilfelle. Brukeren påtar seg derved alt ansvar for bruken.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com

EC	REP
----	-----

 BISCO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92