

Bisco

CE

DUAL-SYRINGE

Instructions for Use

GR

IN-090R8
Rev. 11/18



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σύστημα διπλής σύριγγας δίνει εύκολη και σωστή μίξη βάσης και καταλύτη όταν χρησιμοποιείται το αναμικτικό ρύγχος. Δίνει ευκολία και επιτρέπει στον/στην οδοντίατρο να εκχύσει το υλικό απευθείας στην αποκατάσταση ελέγχοντας παράλληλα τη ροή.

Следуйте изложенным инструкциям по применению продукта в соответствии с относящейся к данному продукту ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОКАЗАНИЯМ, И ИНСТРУКЦИЯМ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα από την διπλή σύριγγα με δεξιόστροφη κίνηση αποσπώντας το.
2. Στην πρώτη χρήση της διπλής σύριγγας: Εκχύστε τα 2-3 πρώτα χιλιοστά υλικού πάνω σε επιφάνεια μίξης για να βεβαιωθείτε ότι η μίξη έγινε σωστά και ομοιόμορφα.
3. Τοποθετήστε το ρύγχος ευθυγραμμίζοντας το μέρος (A) με το μέρος (B) και στρίβοντας το δεξιόστροφα μέχρι να «κλειδώσει».

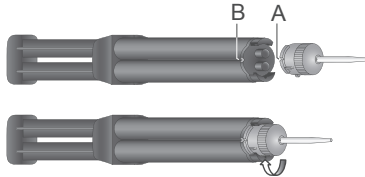

4. Επιλογή 1: εγχύστε το υλικό στην κοιλότητα με το ρύγχος.

Επιλογή 2: για ενδοστοματική έγχυση του υλικού χρησιμοποιήστε το ρύγχος UNIT DOSE TIP. Το τοποθετείτε πάνω στο βασικό ρύγχος.

5. Το βασικό ρύγχος της διπλής σύριγγας πρέπει να παραμείνει στη θέση του μέχρι την επόμενη χρήση. Αν χρησιμοποιηθεί ενδοστοματικά απολυμάνετε το με μαντηλάκι πριν το αποθηκεύσετε. Πριν να αντικαταστήσετε το ρύγχος εγχύστε 2-3 χιλιοστά υλικού.

ΥΓΙΕΙΝΗ: Καλύμματα μιας χρήσης μπορούν να σας βοηθήσουν στον έλεγχο της μόλυνσης των συριγγών.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Ανατρέξτε στις διατάξεις της κοινότητάς σας που αφορούν τα απορρίμματα. Εάν δεν υπάρχουν, ανατρέξτε στις εθνικές περιφερειακές διατάξεις που αφορούν τα απορρίμματα.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Η BISCO, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της να αντικαταστήσει προϊόντα εάν αποδειχθεί ότι τα προϊόντα της είναι ελαττωματικά. Η BISCO, Inc. δεν αποδέχεται την υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση ή ζημιά, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, που απορρέει από τη χρήση ή τη μη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα όπως περιγράφονται. Πριν τη χρήση, είναι υποχρέωση του χρήστη να προσδιορίσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την χρήση που προορίζεται. Ο χρήστης αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με το προϊόν.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com

 BISCO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92