

*Bisco*

CE

***DUAL-SYRINGE***

## Instructions for Use

**DK**

IN-090R8  
Rev. 11/18



BISCO, Inc.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-847-534-6000  
1-800-247-3368

# DUAL-SYRINGE DISPENSERINGS-SYSTEM


## GENEREL INFORMATION

DUAL-SYRINGE dispenserings-systemet muliggør en ensartet blanding af Base og Catalyst ved brug af Static blandespidsen. Dette giver en let arbejdsgang, hvor tandlægen kan applicere materialet direkte på præparationen/ restaureringen med fuld kontrol over mængden af udpresset materiale.

Se venligst for det specifikke produkt instruktionsblad: GENEREL INFORMATION, INDIKATIONER OG BRUGSVEJLEDNING.

## BRUGSVEJLEDNING

1. Fjern hættten fra DUAL-SYRINGE ved at dreje hættten mod uret og trække den af.
2. Ved første anvendelse af DUAL-SYRINGE: Pres de første 2-3mm materiale ud på en udrøringsblok for at sikre en homogen blanding af materialet.
3. Anbring Static blandespidsen så det markerede indhak i spidsens bagkant (A) passer i det tilsvarende indhak i sprøjten forkant (B). Drej spidsen med uret til spidsen er fastlåst på sprøjten.

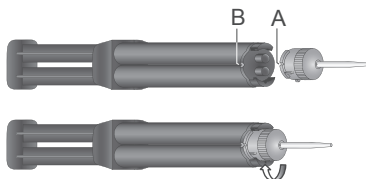

4. ALTERNATIV 1: Sprøjt materialet på præparationen eller restaureringen med Static blandespidsen påsat.

ALTERNATIV 2: Intraoral applicering vha. en Unit-Dose spids: Anbring en unit-dose spids på toppen af Static blandespidsen og sprøjt materialet ind i unit-dose-spidsen. Anbring unit-dose stemplet i en unit-dose sprøjte og påsæt den fyldte unit-dose spids.

5. DUAL-SYRINGE Static blandespidsen bør forblive på sprøjten indtil næste anvendelse. Ved intraoral brug bør spidsen aftørres med desinfektionsmiddel før den sættes til side. Før en ny spids anbringes på sprøjten, udpreses 2-3mm af både Base og Catalyst på en udrøringsblok.

**HYGIEJNE:** Det anbefales at anvende almindelig beskyttelsesafdækning for at hindre enhver form for kontaminering af sprøjterne under behandling.

**BORTSKAFFELSE:** Der henvises til de lokale forskrifter for bortskaffelse af affald. Hvis disse ikke forefindes, henvises til de nationale eller regionale forskrifter for bortskaffelse af affald.

**GARANTI:** BISCO, Inc. anerkender sin forpligtelse til at ombytte fejlbehæftede produkter. BISCO, Inc. accepterer intet ansvar for skader eller tab, hverken direkte eller indirekte, opstået som følge af anvendelsen af - eller af at det ikke var muligt at anvende - produkterne som beskrevet. Det er brugerens ansvar - forud for anvendelsen - at bedømme produktets egnethed til det ønskede formål. Brugeren påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse hermed.

BISCO, INC.  
1100 W. Irving Park Rd.  
Schaumburg, IL 60193  
U.S.A.  
1-800-247-3368  
1-847-534-6000  
www.bisco.com

EC	REP	BISCO France
		208, allée de la Coudoulette
		13680 Lançon De Provence
		France
		33-4-90-42-92-92